


Système VIGILANCE


La protection sans limite




Gestion Appel résident par le système Vigilance

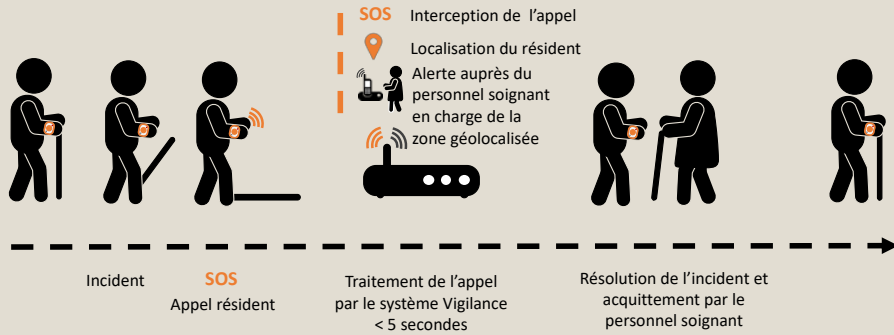

Détection automatique de Chute par Vigilance

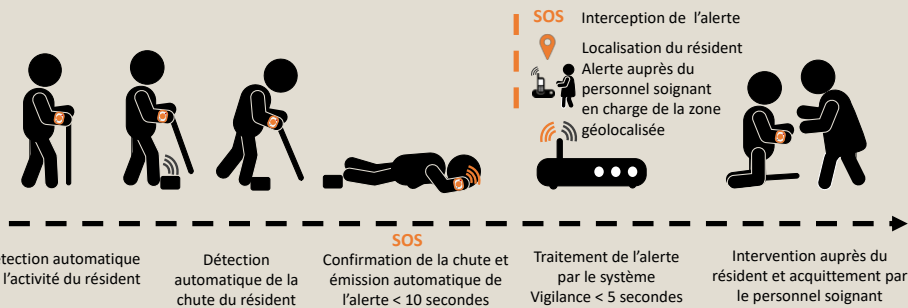

Détection automatique de Fugue par Vigilance

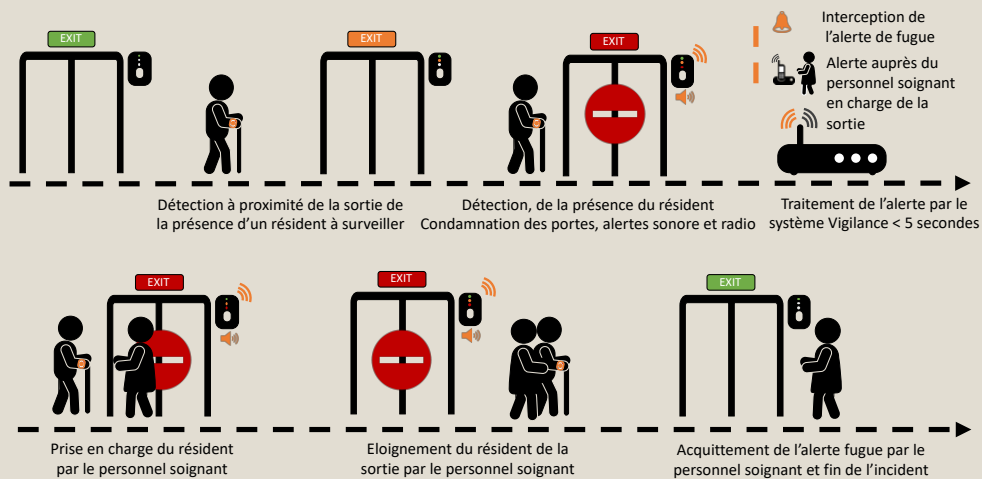

Système VIGILANCE

La protection du Résident

www.vigilance-cleode.fr

CLEODE


CLEODE :
3, rue Thomas Edison - 22300 LANNION - France
P. +33 (0)2 96 48 68 18 - F. +33 (0)2 96 48 19 11
SAS au capital de 167 200 € - 450 570 767 RCS Saint Brieuc

Système Vigilance


Exemple :
 • Couverture : 4 500 m² / 3 niveaux
 • 50 répéteurs
 • 60-70 résidents


Poste de supervision

Un poste de supervision dédié permet de visualiser graphiquement les plans de l'établissement ainsi que les zones géographiques. Un tableau de bord visualise en temps réel les informations relatives aux résidents par chambre et sévérité d'alerte.

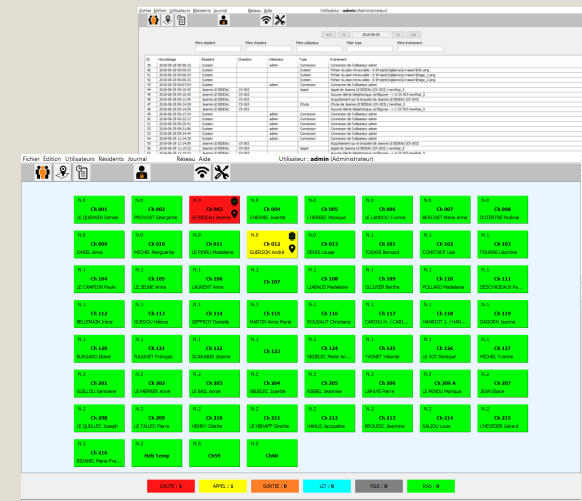
Interface de Téléphonie

Le système Vigilance est un système ouvert qui s'interface avec la plupart des installations existantes. Il intègre nativement une interface SIP pour adresser un PABX IP. D'autres interfaces sont possibles pour dialoguer avec des serveurs spécifiques (Trunk SIP Propriétaire)

SYSTEME VIGILANCE

Le système **Vigilance** est une **solution simple et robuste** pour la **protection et la sécurité** des personnes en maison individuelle ou médicalisée.

PRINCIPALES FONCTIONNALITES



- Appel résident (bouton d'urgence)
- Détection de chute (dure ou molle)
- Détection de fugue (gestion des ouvrants)
- Géolocalisation en temps réel des résidents



- Poste de supervision dédié
- Gestion par zone d'intervention
- Réception message textuel via téléphone, SMS, Email
- Gestion des acquittements d'intervention

La protection universelle du résident complète, évolutive, normalisée et interopérable

Focus sur le produit ZCare



Le bracelet ZCare est un produit permettant d'assister le résident au quotidien. Il intègre les fonctionnalités d'appel d'urgence et de détection de chute. Peu encombrant et très léger, il peut se porter au poignet ou en pendentif.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :



Batterie : LiPo 150mAH avec dispositif de recharge sans fil Qi. Permet un fonctionnement du produit pendant plusieurs mois.



Communication : Le bracelet ZCare communique avec l'infrastructure su système Vigilance selon un protocole radio standard et certifié.



Étanchéité : Le bracelet ZCare possède un boîtier IP65 qui le rend étanche à la poussière et à l'eau.



Dimensions : 55x46x15 mm **Poids** : 37 g (batterie et bracelet compris)

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS :



Appel d'urgence



Détection de chute



Anti-fugue




Acquittement Intervention



Géolocalisation

Une localisation pour une intervention encore plus rapide

Plus de temps perdu pour rechercher un résident en détresse : **Vigilance** localise celui-ci, au sein de l'établissement dès le déclenchement de l'alerte.

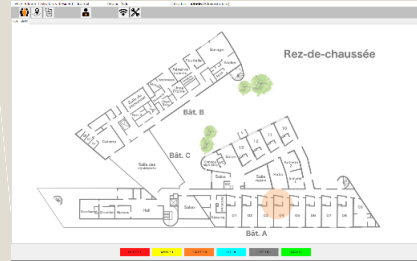

Une Alerte différente pour chaque situation

Lorsqu'une alerte est détectée, l'application **Vigilance** signale immédiatement le type d'alarme (chute, tentative de fugue, appel résident ou absence lit). Le personnel soignant peut ainsi intervenir en ayant connaissance de la cause et de la localisation de l'incident dans l'enceinte de l'établissement.



Personnalisation du type d'alerte

Le système **Vigilance** permet d'associer pour chaque type d'alerte un ou plusieurs types de transmission :

- Message textuel configurable sur le/les portable(s) du personnel de garde
- Signal lumineux sur l'écran de supervision
- Email permettant une traçabilité de l'alerte